



### Instructions par étapes




**1**  
Ecrivez votre nom, prénom et la date de prélèvement de l'échantillon sur l'étiquette du tube de prélèvement.

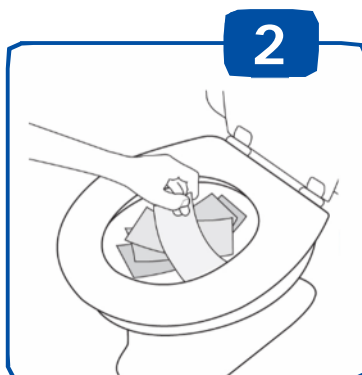


**2**  
Placez le papier de collecte ou plusieurs couches de papier toilette dans la cuvette de toilette au dessus de l'eau. Déposez l'échantillon de selles sur le dessus du papier.

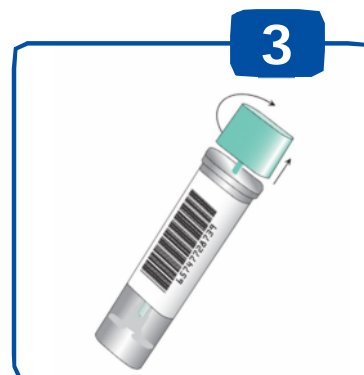


**3**  
Après avoir fait les selles, ouvrez le tube de prélèvement en tournant et tirant légèrement le capuchon vert lié au bâtonnet de test.

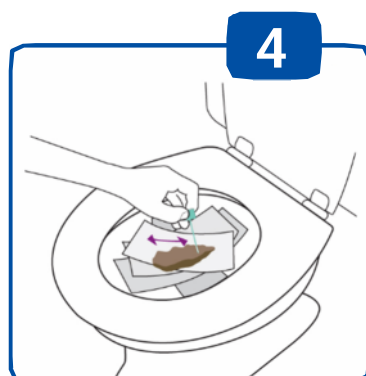


**4**  
Collectez un échantillon en grattant sur la surface des selles avec l'embout du bâtonnet vert.

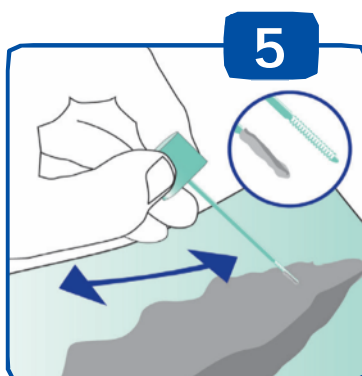


**5**  
La partie rainurée doit être complètement recouverte d'un échantillon de selles.

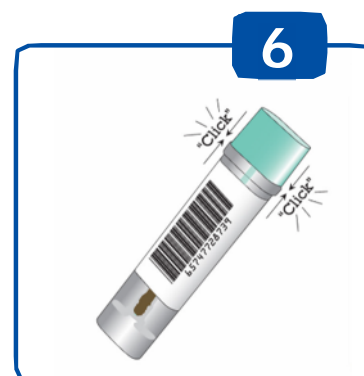

**6**  
Insérez le bâtonnet dans le tube et enfoncez le capuchon vert (cliquez fermement sur le capuchon vert). Ne pas répéter le prélèvement, ne pas rouvrir le tube !

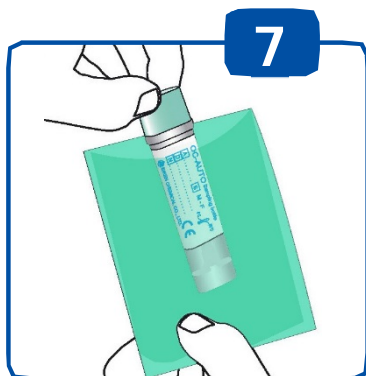

**7**  
Agitez vigoureusement le tube d'échantillon et placez le dans le sac en plastique vert. Refermez le sac en plastique

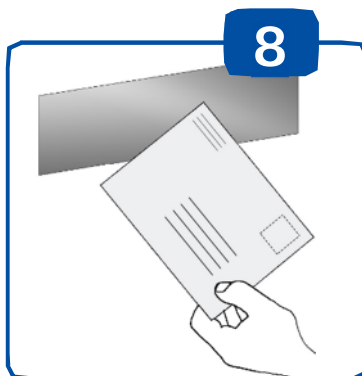

**8**  
Retournez le tube d'échantillon le plus tôt possible au centre de dépistage. Un retour rapide augmente la sécurité de l'échantillon.

V. 2017-04-06 (fr)

Distribué par:

**Mast Diagnostica GmbH**

Feldstraße 20  
DE-23858 Reinfeld

Tel. +49 (0)4533 2007 0  
Tel. +49 (0)4533 2007 68

[fit@mast-diagnostica.de](mailto:fit@mast-diagnostica.de) [www.fit-screening.de](http://www.fit-screening.de)



**Mast  
Group**

Producteur:



**EIKEN CHEMICAL CO., LTD.**  
4-19-9, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Japan