


### Pobieranie próbki krok po kroku



**1**  
Napisać na etykiecie na próbówce imię i nazwisko oraz datę pobrania próbki.




**2**  
Przed oddaniem stolca umieścić najpierw w muszli sedesowej kilka warstw papieru toaletowego lub przeznaczonego do tego celu specjalnego papieru, aby ułatwić pobranie próbki.

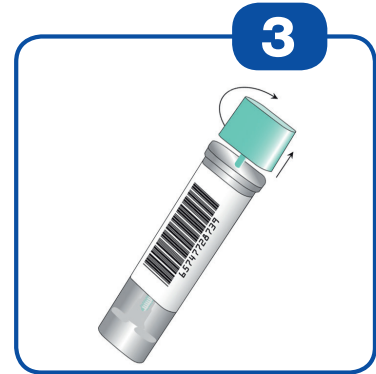


**3**  
Po oddaniu stolca lekko odkręcić z próbówki nakrętkę z pałeczką do pobierania próbki i wyciągnąć ją.




**4**  
Za pomocą końcówki turkusowej pałeczki do pobierania próbki pobrać próbkę kału z kilku miejsc.

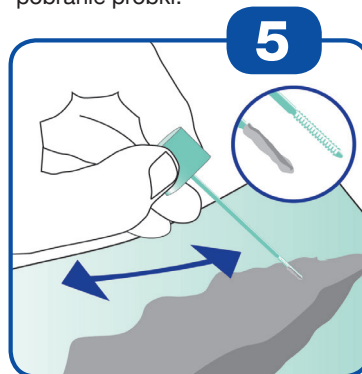


**5**  
Rowki na końcówce muszą być całkowicie wypełnione kałem.

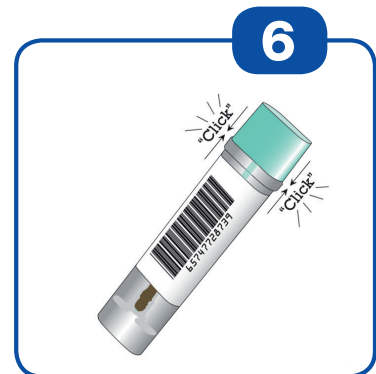

**6**  
Włożyć pałeczkę do pobierania próbki do próbówki i zamknąć próbówkę. Słyszalne zatrzaśnięcie typu „klik” oznacza prawidłowe zamknięcie próbówki. Nie pobierać próbki ponownie!

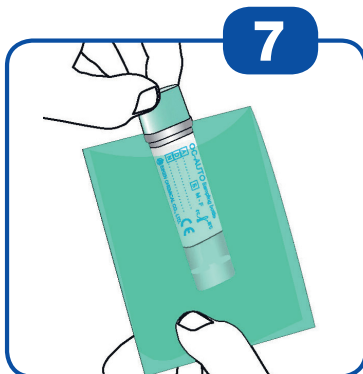

**7**  
Mocno potrząsnąć próbówką. Włożyć ją do zielonej torebki, a następnie zamknąć torebkę.

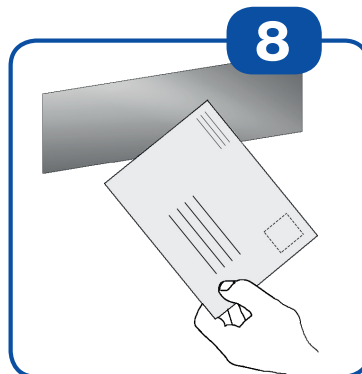

**8**  
Odnieść próbkę możliwie jak najszybciej do punktu wydającego próbki, szybkie oddanie próbki zwiększa poprawność uzyskanych wyników.

V. 2017-04-06 pl

Dystrybutor / distributed by:

**Mast Diagnostica GmbH**

Feldstraße 20

DE-23858 Reinfeld

Tel. +49 (0)4533 2007 0

Tel. +49 (0)4533 2007 68

fit@mast-diagnostica.de

www.fit-screening.de



**Mast  
Group**

Producent:



**EIKEN CHEMICAL CO.,LTD.**  
4-19-9, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Japan